

■ 標準価格

LED照射器 ノブレスA 一式 125,400円(税込)
(本体価格 114,000円)

■ 内容物



- ① コードレス照射器本体
- ② 感染防止スリーブ 先端用
- ③ チャージャー・アダプター
- ④ マニュアル
- ⑤ ライトシールド
- ⑥ 光診断サポーター用フィルター

(その他)
保証書・登録カード・添付文書
感染防止スリーブ全体用サンプル

■ 消耗品 (別売)

・ノブレス 感染防止スリーブ 先端用
300 枚入り 2 個 セット 12,540 円 (税込)
(本体価格 11,400円)

・ノブレス 感染防止スリーブ 全体用
300 枚入り 2 個 セット 12,540 円 (税込)
(本体価格 11,400円)

※ 感染防止スリーブ各種はノブレスと共通商品です。
※ バッテリーはご自身で交換ができませんので、お送りください。

仕 様	出力(チャージャー)	5V DC	ハンドピース全長	228×28×28(mm)
	充電池	3.7V Lithium-ion 2600mAh	充電台	88.5×106.6×79.5(mm)
	重合用光源	10W Dental Broadband LED	ハンドピース質量	170g
	中心波長	385nm～515nm(Peak405/440/465nm)	充電台質量	207g
	出力	3000mw/cm ² ±10%	保証期間	本体 : 12ヵ月
	光診断サポーター用光源	405nm Blue Chip LED		バッテリー : 6ヵ月

医療機器の分類:一般医療機器 歯科重合用光照射器 医療機器製造販売届出番号: 27B1X00130000019 号 JMDN コード:35775000

■ 関連商品



この価格で驚くべきハイパワー・ハイスピード

NOBLESSE

1秒モードが診療を変える


LED照射器ノブレス
標準価格 97,900円(税込)
(本体価格 89,000円)

■3000mw/cm²の高出力

高出力LEDで治療時間を短縮！
モード選択によりパワー、照射時間を選べます。

■回転可能な薄型ヘッド

薄型ヘッドで180° 回転
するため患部が狙いやすい設計です。

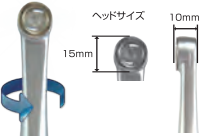

■白色LED搭載

口腔内照明として
ショット前の位置
決めに有効です。



■すぐれた放熱性で瞬時に冷却

ラジエータ効果が高い銅製ヒートシンクと
アルミボディの組み合わせがハイパワー照
射と連続照射を実現しました。

医療機器の分類 : 一般医療機器 歯科重合用光照射器 医療機器製造販売届出番号 : 27B1X00130000012号 JMDNコード : 35775000

製造販売元 dt デンタルテクニカ 〒567-0881 大阪府茨木市上中条1-1-37-1F TEL : 072-621-0884 FAX : 072-621-0844 http://www.dentaltechnica.com info@dentaltechnica.com	製造元 Max Dental Co.,Ltd. #203-605,Bucheon Techno Park Ssangyong 3 Cha Apt., Samjeong-dong,Ojeong-gu,Bucheon-si,Gyeonggi-do,Korea http://www.maxdental.co.kr	販売店
--	--	-----

CAT-2409NBAAB

高性能と美しいデザインのハイエンドモデル



ノブレス エー

NOBLESSE A


ADVANCED CURING LIGHT



202409 版

高性能と美しいデザインのハイエンドモデル

■ マルチ波長照射

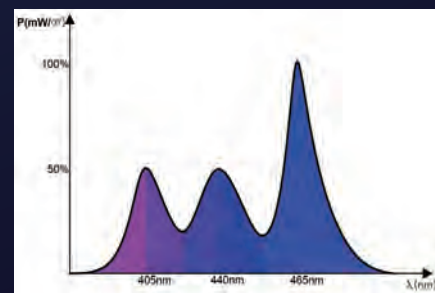


3波長の出力によりどんな光重合型材料にも対応。新たにブリーチングモードも追加されました。

■ 光照射を知り尽くした形状





本体ネックに角度を持たせ口腔内での操作性が更に向上。ノブレスと同様にヘッドは180°回転します。

■ ヘッドサイズ縮小

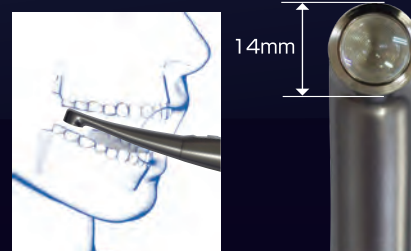

レンズの口径はそのまま、ヘッドの外径が約1.5mm小さくなりました。

■ 光診断サポーター

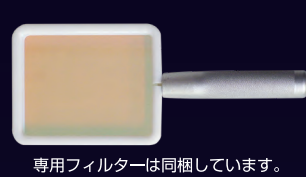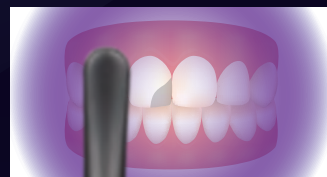

専用フィルターは同梱しています。

405nmの紫色光と専用フィルターを併用することで、クラック・人工歯(レジン充填)と天然歯の識別などをサポートする視覚的診断補助機能。

※ 診断の確定は従来通りの方法をお願いします。

■ 均一な光分布と直進性



光学系デザインの最適化により、照射面全体が均一な照度で、かつ直進性がよいため照射面から少し離れても照度が落ちません。

回転可能な薄型ヘッド

薄型ヘッドで180°回転するため患部が狙いやすい設計です。



■ Shoot (ショット)

青色LED照射スイッチ

■ Ready (レディー)

LED照明スイッチ

■ LEDディスプレイ

- 照射モード
- 照射残り時間
- バッテリー残量表示



■ MODE

13種類の照射モードの中から好きなモードだけを選べます。

■ チャージャー

LEDの色で充電状態をお知らせします。
・オレンジ: 充電未完了
・グリーン: 充電完了



■ 多様な13種類の照射モード



モードがたくさんあると煩雑と思われる場合は、治療に必要なモードだけを選択し表示することができます。操作は簡単、モードボタンを長押し、セレクト ON/OFF のみです。

[m] 長押し Selection mode (セクションモード) ▶ [R] ボタンでチョイス セレクトのON/OFF ▶ [m] 長押しで治療モードにモードの変更が可動になります。